

真空攪拌埋没器

# Vmixing-D

ブイミキシング-D



**DAIEI DENTAL PRODUCTS CO.,LTD.**

10-17,Kyomachibori 1-chome,Nishiku,Osaka-550-0003,JAPAN

# フィミキシング-D Vmixing-D

コンプレッサーからのエアを吸引圧力に変換して真空攪拌を行う、シンプル設計の真空攪拌埋没器です。壁掛け、スタンド式のどちらでも設置可能で、攪拌カップは大(500ml)・小(250ml)2種類が標準で付属しております。

## ● コンパクトなエアバキューム方式

既設のコンプレッサーに接続できるエアバキューム方式の採用により、コンパクトで音も静かです。

## ● 設置方式が選べる2タイプ

本体は壁掛け式とスタンド式(オプション)の2種類の取り付け方式がありますので、設置スペースに合わせた選択が可能です。

## ● 高いメンテナンス性

真空ポンプ内蔵式に比べ、メンテナンス性が高く、日々のお手入れも簡単に行っていただく事ができます。

## ● 合理性を追求した攪拌カップ


攪拌カップは吸引圧力によって自動的に本体に保持され、攪拌ハネは練り込み効果と、かき混ぜ効果を兼ねた、合理的な形状になっています。ハネはステンレス製で、高い強度と清掃性があります。

攪拌カップは大(500ml)、小(250ml)の他に、オプションで特大(1000ml)もご用意しております。


## ● カップが落下しないリリース機構

攪拌が終わっても、攪拌カップはメインスイッチを押さない限り外れることのない、安心設計です。

## ● 操作パネル

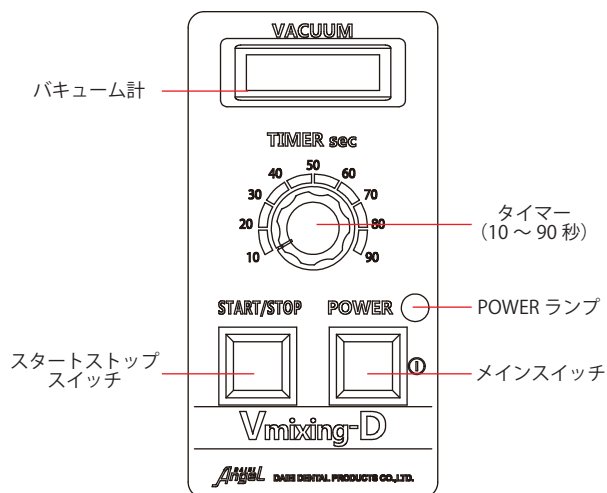

## ● 攪拌カップ

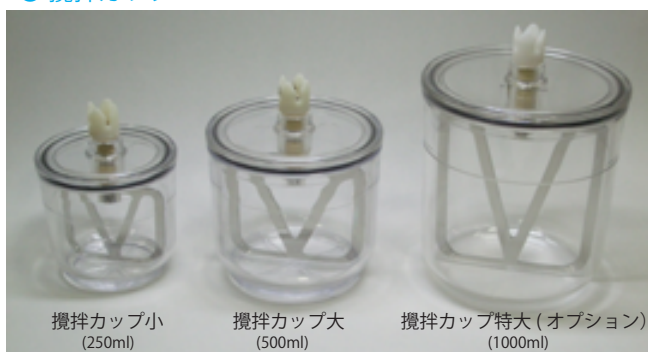

## ● 設置例



壁掛け式



スタンド式(オプション)

◆ 一般的名称	歯科技工用真空攪拌器
◆ 電源電圧	AC100V(50/60Hz)
◆ 電源入力	190VA
◆ 使用エア一圧	0.5 ~ 0.6 MPa
◆ 到達真空度	-90kPa (キロパスカル)
◆ 攪拌時間	10 ~ 90 秒 (任意に設定)
◆ 本体寸法	W214×D188×H229mm
◆ 本体重量	5.6 kg
◆ 攪拌カップ	大(500ml)・小(250ml)各1
◆ クラス分類	一般医療機器
◆ 届出番号	27B2X00306M00001
◆ 別売品	据置用スタンド 攪拌カップ特大(1000ml)

※仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載

●お問合せは下記まで

製造販売元

**ANGEL 大榮歯科産業株式会社**

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
 東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026  
 名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626  
 福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

<http://www.daiei-dental.jp>