

DAIEI  
*Angel*

Steam Cleaner

**L** O C O M O

歯科用高压蒸気洗浄器

ロコモ



**DAIEI DENTAL PRODUCTS CO.,LTD.**

10-17,Kyomachibori 1-chome,Nishiku,Osaka-550-0003,JAPAN

# LOCOMO

## 特長

### コンパクト

ロコモは、コンパクト設計なので置き場所を選ばず、水タンクは自由にレイアウトでき、給水も容易です。

### 壁掛けが可能

別売りの壁掛けハンガーと組み合わせれば、本体を壁に掛けて使用することができます。

### 強力な高圧蒸気

飽和水と蒸気の混合体（湿り飽和蒸気）は、洗浄力が高く、洗浄時間と労力を大幅に節約でき、小型ながらもスチームの噴射力は抜群です。

### 安全性と耐久性


貫流式特殊小型ボイラーは、安全性に優れ、だれでも簡単に使用できます。また、ロコモは電磁弁を使用していないシンプルな設計の為、トラブルが少ない構造です。

### スケール対策

スケール（水道水中に含まれるミネラル成分が固まった物）対策として、付属のイオン交換器や、別売りのクリーナー液があります。さらにハンドピース部にスケールフィルターを設けており、簡単に分解、清掃ができるようになっています。

## 壁掛け設置例

壁掛けハンガー（別売）

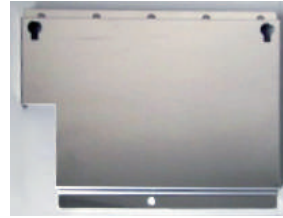

- 壁掛けハンガーを使用すれば本体を壁面に取り付けることができ、省スペース化と作業性が更に向上します。

定価 15,000 円（税別）



壁掛け設置例


## イオン交換機について




定価 14,500 円（税別）

- イオン交換器は水道水中にイオンの状態で含まれる不純物（ミネラル成分）が、ロコモ本体に混入しないようにろ過するための器具です。
- イオン交換器中の特殊な樹脂は、主な不純物であるカルシウムイオンと反応してろ過を行います。飽和量を超えるとそれ以上はろ過できなくなりますが、再生処理を行うことで再び使用することができるようになります。

## ハンドピースホース

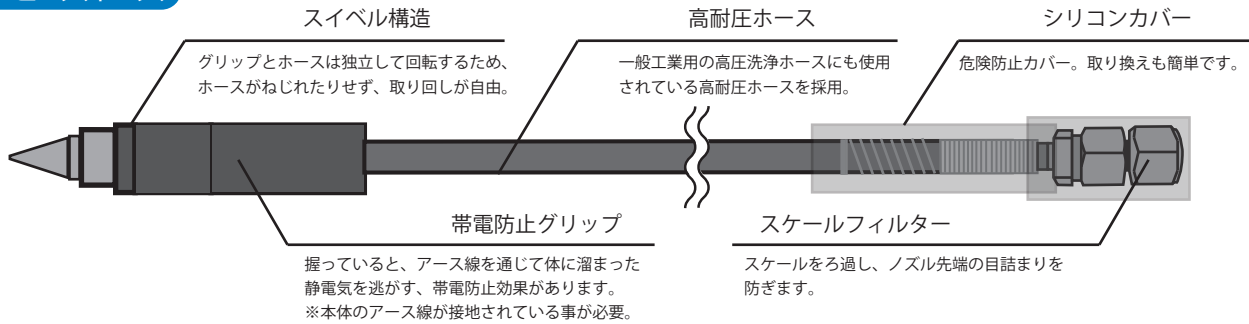

## オプションホース

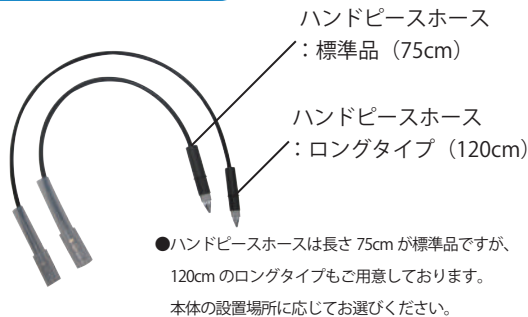

一般医療機器 歯科技工用形成器具 届出番号：27B2X00306K00003

## 製品情報

### 仕様

本体寸法	W295×D160×H245
電源	AC100V 1450 W
重量	12kg
蒸気発生	貫流式特殊小型ボイラー
最高圧力	0.9 MPa
水タンク	容積 4 ℓ

定価 278,000 円（税別）

### 付属品

ハンドピースホース一式 75cm  
吸水ホース  
フットスイッチ  
ハンドピースホルダーアーム  
水タンク  
イオン交換器（活性炭入）  
活性炭フィルター（交換用）  
誘導水用注入器

### 別売品

壁掛けハンガー、クリーナー液