

火山灰研磨材

Angel V POLISH

エンゼル V ポリッシュ

硬質アクリルレジンから軟質の熱可塑性樹脂まで幅広いレジン材の粗～仕上げ磨き用にご使用いただけます。多孔質で鋭利な突起物がない「火山灰」を主成分としており、研磨物に細かいキズを付けず短時間で研磨を行うことが可能です。

■火山灰研磨材 ANGEL V POLISH

	色調	平均粒径(μm)	比重(g/cm ³)	容量	標準価格(税別)
粗目	白色	180	0.18～0.23	750g	1,800円
細目	淡黄色	70	0.18～0.23	750g	1,800円
細々	淡白色	30	0.5～0.8	1200g	2,400円

■成分

シリカ 酸化カリウム 酸化ナトリウム
酸化アルミナ ヘマタイト

■使用上の注意事項

- ・ 本材使用時には防塵マスクや保護眼鏡、換気装置を使用して下さい。
- ・ 目に入った場合は十分に洗眼して目薬をさし、取れない時は眼科医の診察を受けて下さい。
- ・ 皮膚に付着した場合は肌荒れの原因となるので水洗いをして下さい。
- ・ 粉塵が舞うのでエアーガンでの除去はお止め下さい。
- ・ 万ー吸入した場合は十分にうがいをして下さい。



一般的名称：歯科用研磨器材
分類：クラスⅠ
届出番号：27B2X00306D00002

DAIEI DENTAL PRODUCTS CO.,LTD.

10-17,Kyomachibori 1-chome,Nishiku,Osaka-550-0003,JAPAN

技工用電気レーズ関連商品

技工用電気レーズ

エンゼルレーズ・ディー

- 無段階変速で調節するツマミにより、余裕をもって操作できます。
- ネジ固定式のホルダーは、使用中の緩みや脱落が無く安全です。
- ON/OFF スイッチをフラットパネルにすることで、異物混入の故障から防ぎます。

一般的名称：歯科技工用電気レーズ	最高回転数：10,000rpm	
分類：クラスⅠ	回転範囲：無段階 (0～10,000rpm)	
許可 / 届出番号：27B2X00306M00002	定格トルク：2kgfcm(10,000rpm)	
電源電圧：AC100V 50/60Hz	外形寸法：W300×D170×H198mm	
消費電力：0.20kVA	質量：約 9.6kg	標準価格 125,000 円 (税別)



レーズ用ブラシ

UFO レーズブラシ

- 木軸を採用したレーズブラシです。ブラシ密度が高く、効率よく研磨ができます。

一般的名称：歯科用研磨器材	1 列	標準価格	2,700 円 (税別)
分類：クラスⅠ	2 列	標準価格	4,800 円 (税別)
許可 / 届出番号：27B2X00306C00001	3 列	標準価格	6,800 円 (税別)
ブラシ：豚毛	4 列	標準価格	11,000 円 (税別)
各 12 個入			



エンゼルレーズブラシ

- プラスチック軸を採用しており、空転が少なくスムーズに使用できます。

一般的名称：歯科用研磨器材	1 列	標準価格	2,400 円 (税別)
分類：クラスⅠ	2 列	標準価格	4,200 円 (税別)
許可 / 届出番号：27B2X00306A00001	3 列	標準価格	5,300 円 (税別)
ブラシ：豚毛			
各 12 個入			



エンゼルナイロンブラシ

- 研磨剤入りナイロン繊維ブラシ。高い植毛技術により、最後までしっかりと使えます。

一般的名称：歯科用研磨器材	2 列	標準価格	1,000 円 (税別)
分類：クラスⅠ	3 列	標準価格	1,200 円 (税別)
許可 / 届出番号：27B2X00306A00003			
ブラシ：ナイロン繊維			
各 1 個入			



エンゼルチャモイスブラシ・ホイール

- 鹿革ブラシ：コシのある鹿革をブラシ状にすることでデンチャーの歯頸部や細かい形状もスムーズに研磨できます。

- 鹿革ホイール：綿バフのようにばらけることなく光沢仕上げができます。


一般的名称：歯科用研磨器材	2 列	標準価格	1,200 円 (税別)
分類：クラスⅠ	3 列	標準価格	1,400 円 (税別)
許可 / 届出番号：27B2X00306A00002	ホイール	標準価格	1,000 円 (税別)
各 1 個入			



フレックスタスクホイール

- 片面がシリコンでコーティングされているソフトモスリンバフ。
- エンゼルV ポリッシュとの相性も良く、短時間で滑沢に仕上がります。
- 消耗時に取り外し可能なリングは長く使用でき、経済的です。
- ノンメタルクラスデンチャー専用

一般的名称：歯科用研磨器材	標準価格	OPEN
分類：クラスⅠ		
許可 / 届出番号：27B2X00041000219		
1 個入		

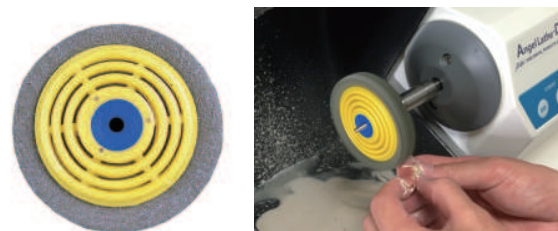

Angel 大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀 1 丁目 10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿 1-5-10 1510ビル 8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市中千種区今池 南 2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

お問い合わせ