

サンデックスV
SANDEX V



金属床用循環式サンドブラスター

DAIEI DENTAL PRODUCT CO.,LTD

10-17,Kyomachibori 1-chome,Nishiku,Osaka-550-0003,JAPAN



価格等の情報は
こちらから



クリーン&セーフティ

金属床用サンドブラスターは、一度に大量の埋没材を除去するため、作業中は粉塵となった埋没材が庫内に充満しています。扉の開閉時にはどうしてもこの粉塵が庫内に漏れだし、吸えば健康を害する恐れがあります。

『サンデックスV』は外部集塵装置を使用しなくても、内蔵の吸引機構により、扉を開けると同時に庫内の空気を強制的に換気し、粉塵を庫外に逃がしません。

また、扉を確実に締めないとサンド処理が出来ない構造になっていますので、安全で、衛生的に作業が行えます。

ハイパワー

卓上型ながら、大型のエアーノズル(ベンチュリー)と専用カーボランダム研磨材により、リン酸塩系埋没材や、高合金表面の分厚い酸化膜もスムーズに処理します。

特長

- 固定ノズル方式の循環式金属床用サンドブラスター。
- 研磨材の噴射量が多く、短時間に埋没材や酸化膜を処理する。
- 扉の開閉に連動する内部集塵装置により、粉塵の飛散を防ぐ。
- 扉の覗き窓曇り防止に、取り替え簡単なシートを装備。

仕様

エアー圧：0.3～0.7MPa
 本体寸法：W350×H570×D385(mm)
 電源電圧：AC100V
 電力：150VA
 本体重量：15kg
 集塵装置：エアーノズルによる吸引方式


一般的名称:歯科技工用金属表面加工器 分類:クラスI 許可/届出番号:27B2X00306K00014

付属品

- フットスイッチ
- 配管用ホース(φ8)・継手
- 覗き窓防護シート(11枚)
- 研磨材(カーボランダム)3kg

別売品

- 研磨材(カーボランダム)3kg
- 覗き窓防護シート(100枚)

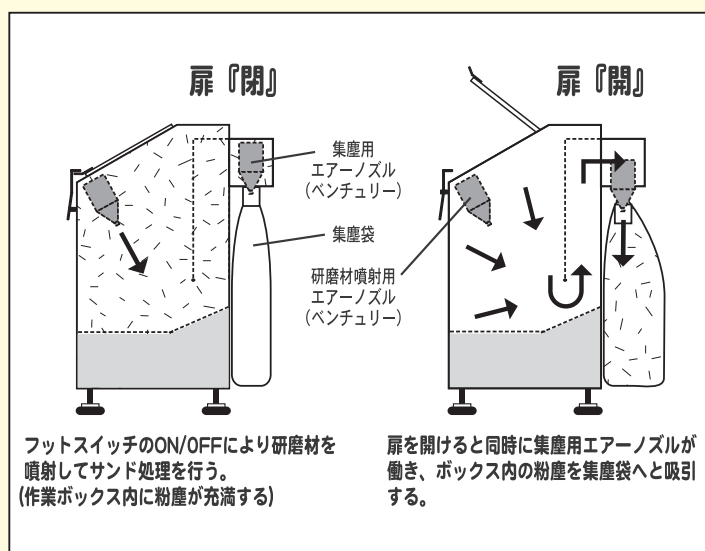

大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
 東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387
 名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
 福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

<https://www.daiei-dental.jp>

※仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。