

DAIEI  
*Angel*

Steam Cleaner

# LOCOMO

歯科用高圧蒸気洗浄器

ロコモ



**DAIEI DENTAL PRODUCTS CO.,LTD.**  
10-17,Kyomachibori 1-chome,Nishiku,Osaka-550-0003,JAPAN

価格等の情報は  
こちらから

# LOCOMO

歯科用高圧蒸気洗浄器  
Steam Cleaner ロコモ

一般医療機器 歯科技工用形成器具  
届出番号:27B2X00306K00003

## 特長

### コンパクト

ロコモは、コンパクト設計なので置き場所を選ばず、水タンクは自由にレイアウトでき、給水も容易です。

### 壁掛けが可能

別売りの壁掛けハンガーと組み合わせれば、本体を壁に掛けて使用することができます。

### 強力な高圧蒸気

飽和水と蒸気の混合体（湿り飽和蒸気）は、洗浄力が高く、洗浄時間と労力を大幅に節約でき、小型ながらもスチームの噴射力は抜群です。

### 安全性と耐久性

貫流式特殊小型ボイラーは、安全性に優れ、だれでも簡単に使用できます。また、ロコモは電磁弁を使用していないシンプルな設計の為、トラブルが少ない構造です。

### スケール対策

スケール（水道水中に含まれるミネラル成分が固まった物）対策として、再生可能なイオン交換器が付属しています。さらにハンドピース部にスケールフィルターを設けており、簡単に分解、清掃ができるようになっています。

## 壁掛け設置例

- 壁掛けハンガーを使用すれば、本体を壁面に取り付けることができ、省スペース化と作業性が更に向上します。



壁掛けハンガー（別売）




壁掛け設置例

## イオン交換器IIについて




- イオン交換器IIは、水中にイオンの形で溶けているカルシウムや塩素成分を「布フィルターセット」と反応・付着させることにより、ろ過しスケールを未然に防ぐことで、故障のリスクを低減します。
- イオン交換器IIの内部に使用されている布フィルターは、吸着できるカルシウムなどの量に限りがあるため一定の使用期間・処理水量を超えると、ろ過能力が大きく低下します。定期的にご交換ください。

## ハンドピースホース

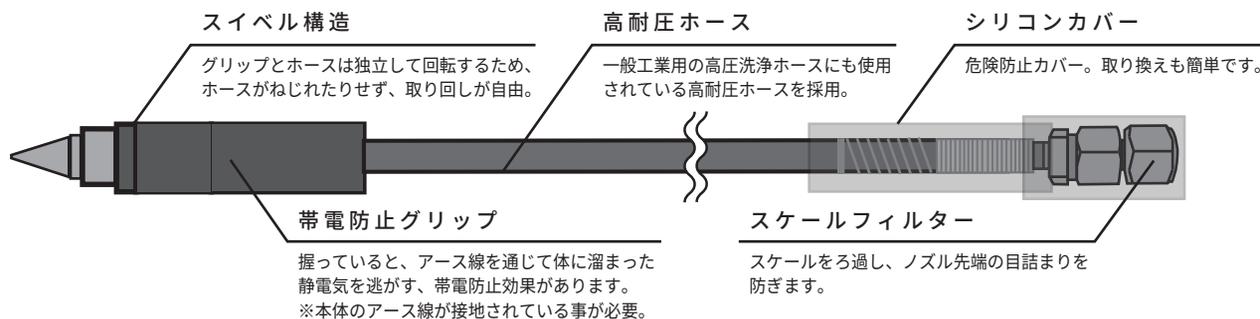

## オプションホース

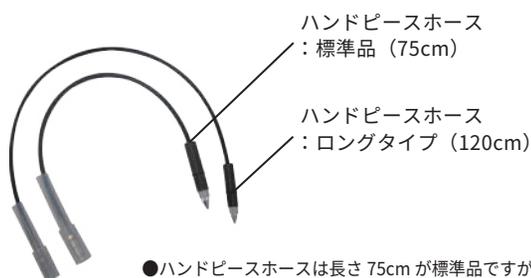

- ハンドピースホースは長さ75cmが標準品ですが、120cmのロングタイプもご用意しております。本体の設置場所に応じてお選びください。

## 製品情報

### 仕様

|      |                  |
|------|------------------|
| 本体寸法 | W295×D160×H245mm |
| 電源   | AC100V 1450 W    |
| 重量   | 12kg             |
| 蒸気発生 | 貫流式特殊小型ボイラー      |
| 最高圧力 | 0.9 MPa          |
| 水タンク | 容積 4ℓ            |

### 別売品

壁掛けハンガー

### 付属品

ハンドピースホース一式 75cm  
吸水ホース  
吸水ホースフィルター  
水タンク  
イオン交換器II  
フットスイッチ  
ハンドピースホルダーアーム  
アーム固定ネジ  
注水用注射器  
レンチ（スケールフィルター分解用）  
3P → 2P 変換アダプタ

**DAI-ANGEL 大榮歯科産業株式会社**

〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
東京 TEL.03-6806-3381 名古屋 TEL.052-731-0610 福岡 TEL.092-473-7567

※仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

2025.09