

DAIEI
Angel

Steam Cleaner

L OCOMO

歯科用高圧蒸気洗浄器

ロコモ



DAIEI DENTAL PRODUCTS CO.,LTD.
10-17,Kyomachibori 1-chome,Nishiku,Osaka-550-0003,JAPAN

価格等の情報は
こちらから

LOCOMO

特 長

コンパクト

ロコモは、コンパクト設計なので置き場所を選ばず、水タンクは自由にレイアウトでき、給水も容易です。

壁掛けが可能

別売りの壁掛けハンガーと組み合わせれば、本体を壁に掛けて使用することができます。

強力な高圧蒸気

飽和水と蒸気の混合体（湿り飽和蒸気）は、洗浄力が高く、洗浄時間と労力を大幅に節約でき、小型ながらもスチームの噴射力は抜群です。

安全性と耐久性


貫流式特殊小型ボイラーは、安全性に優れ、だれでも簡単に使用できます。また、ロコモは電磁弁を使用していないシンプルな設計の為、トラブルが少ない構造です。

スケール対策

スケール（水道水中に含まれるミネラル成分が固まった物）対策として、再生可能なイオン交換器が付属しています。さらにハンドピース部にスケールフィルターを設けており、簡単に分解、清掃ができるようになっています。

壁掛け設置例

壁掛けハンガー（別売）

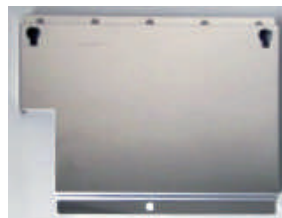

- 壁掛けハンガーを使用すれば本体を壁面に取り付けることができ、省スペース化と作業性が更に向上します。




壁掛け設置例

イオン交換器について




- イオン交換器は水道水中にイオンの状態で含まれる不純物（ミネラル成分）が、ロコモ本体に混入しないようにろ過するための器具です。
- イオン交換器中の特殊な樹脂は、主な不純物であるカルシウムイオンと反応してろ過を行います。飽和量を超えるとそれ以上はろ過できなくなりますが、再生処理を行うことで再び使用することができます。

ハンドピースホース

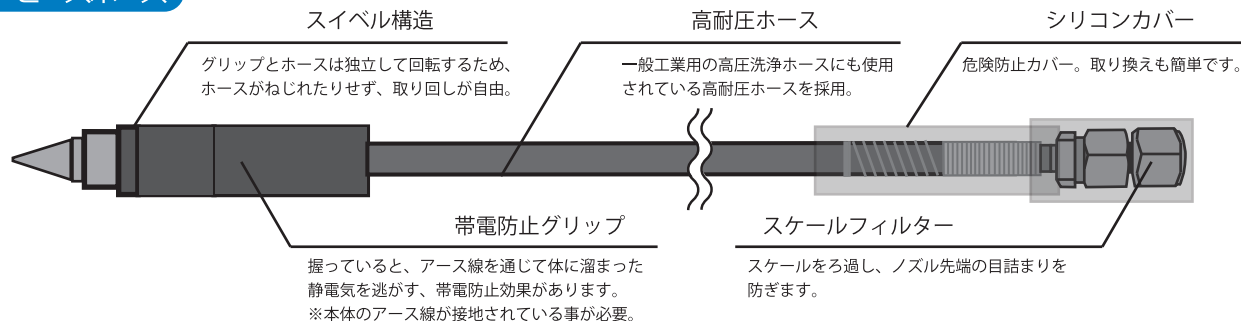

オプションホース

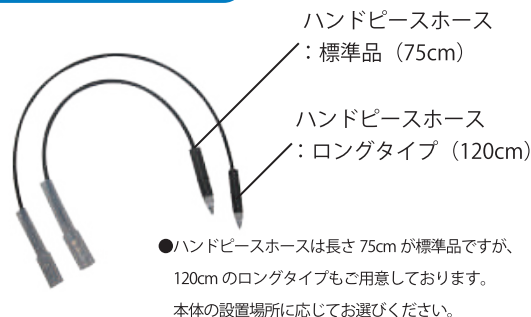

製品情報

仕 様

本体寸法	W295×D160×H245mm
電 源	AC100V 1450 W
重 量	12kg
蒸気発生	貫流式特殊小型ボイラー
最高圧力	0.9 MPa
水タンク	容積 4 ℓ

付属品

ハンドピースホース一式 75cm
吸水ホース
フットスイッチ
ハンドピースホルダーアーム
水タンク
イオン交換器（活性炭入）
活性炭フィルター（交換用）
誘導水用注入器

別売品

壁掛けハンガー

一般医療機器 歯科技工用形成器具 届出番号：27B2X00306K00003

Angel 大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市中千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897
※仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。