

Large-Size Furnace

G3-01




一般医療機器 届出番号 27B3X00209000027

A high level of satisfaction

マイコン制御 大型電気炉

3面ヒーターで
均一な温度分布
による昇温

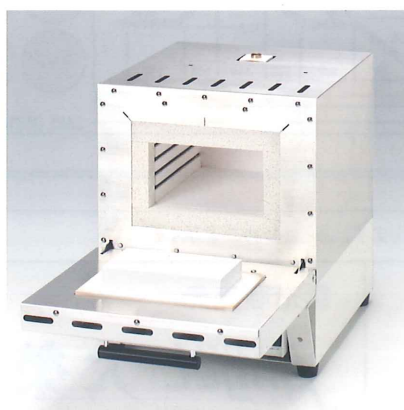

90mmリング
4床収納可能で
効率アップ

広い炉内と均一な温度分布

90mmリングが4個收容できるワイドな炉内に、天面と両側の3面ヒーターを採用し、均一な温度分布による昇温を実現しました。
100V仕様なので電気工事不要ですぐにお使い頂く事ができます。

クイックモードとプログラムモードで様々な昇温に対応


800℃まで30分(無負荷時)で昇温するクイックモードを1パターンと、最高三段階までの係留が出来るプログラムモード5パターンを登録可能。
係留時間や昇温時間を分単位で登録できるので、精密な昇温スケジュールに対応します

タッチパネルによる簡単操作と充実の機能

モードの設定はタッチキーで簡単に行う事が出来ます。
昇温開始はクイックモードなら電源を入れてスタートスイッチを押すだけです。
昇温中に工程を省略する機能や終了までのおおよその残り時間を表示する機能も備えています。

時計を内蔵し、予約タイマー設定が簡単

現在時刻を表示(24時間計)するデジタルクロックを内蔵しており、任意の時刻で予約タイマーを設定できます。
特に毎日決まった時間に鑄造を行う場合に非常に便利です(最長72時間先までの予約が設定可能)。

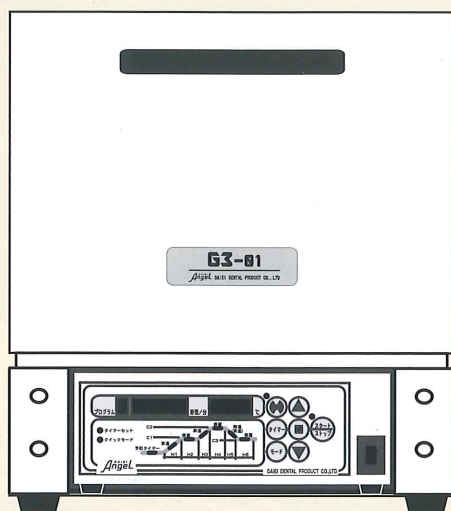

名称	G3-01 (ジースリーゼロワン)
電圧	AC100V (±10%) 50/60Hz
消費電力	1400VA
重量	32kg (本体)
本体寸法	W380×H480×D500 (mm)
炉内有効寸法	W200×H120×D240 (mm)
ヒーター配置位置	天面・左右側面 (3面ヒーター型)
最高使用温度	1000℃
昇温速度 (無負荷時)	フルパワー昇温 800℃まで30分
別売品	外部リレー回路 (電気炉と消臭装置等を連動させる際に使用)

一般医療機器 届出番号 27B3X0020900027

PANEL INDICATION & OPERATION

プログラムNo.表示


プログラムモード時の登録No.を表示します

時間表示

現在時間(24時間計)や昇温終了までの残り時間を表示します

昇温グラフ

昇温工程の経過を表示します

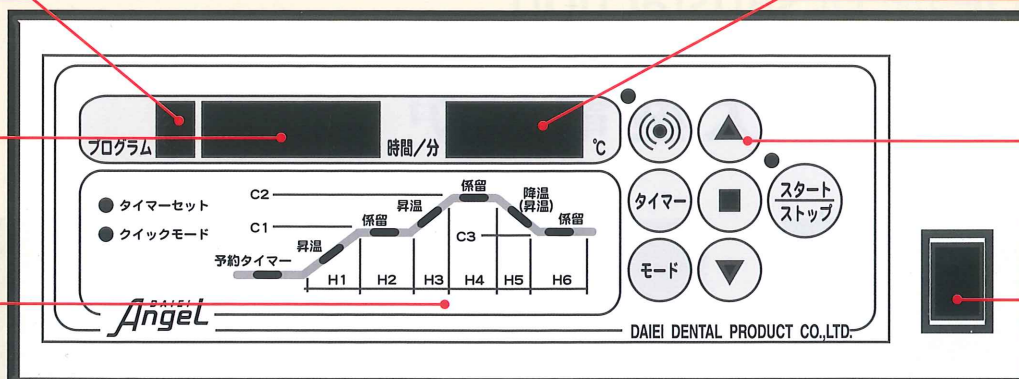

炉内温度表示

現在炉内温度や設定温度を表示

各種設定キー

フラットパネルで軽いタッチで操作できます

電源スイッチ

※仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載

●お問合せは下記まで

製造販売元

Angel 大榮歯科産業株式会社

<http://www.daiei-dental.jp>

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
 東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510E'W8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
 名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
 福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897