



JUN-AIR コンプレッサー

超低騒音型（給油式）

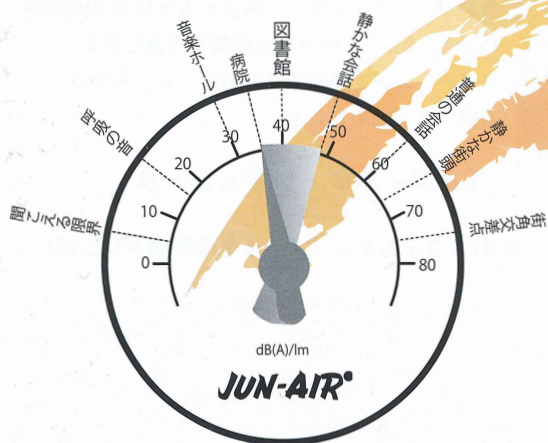

JUN-AIR

- ・騒音値は35~48dB(デシベル)と超低騒音で図書館内並の静けさです。
- ・小型で場所を取らず、作業机の下にも設置可能です。
- ・マンション、住宅密集地での使用に最適です。

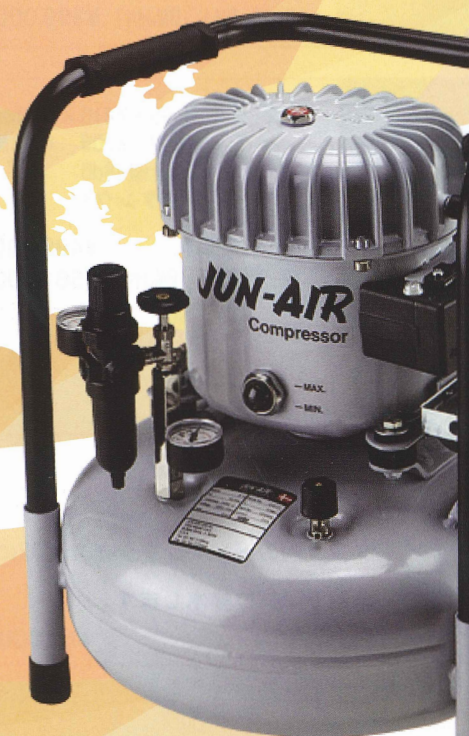

JUN-AIR コンプレッサー

JUN-AIR とは？

1958年に初めてコンプレッサーを市場に出して以来、JUN-AIRはコンプレッサー市場で世界をリードしています。JUN-AIRコンプレッサー（給油式）騒音値が35～48dB(A)と非常に静かで、信頼できるコンプレッサーです。世界各国で50万台を超える顧客実績がJUN-AIRコンプレッサーの優れた品質と信頼性を証明しています。

JUN-AIRコンプレッサー（給油式）はその静寂性ゆえに、世界各国の研究室、歯科、医学分野等で数多く使用されています。また低振動、コンパクト設計のため設置場所を選びません。

JUN-AIR®

JUN-AIR ラインアップ



6-15 H485×W378×D378mm
100V 400W 0.54馬力
騒音値45dB
15Lタンク付

6-15（標準） **¥323,000**（税別）
6-15 BMJ（BMJ付） **¥386,000**（税別）



6-25 H555×W378×D378mm
100V 400W 0.54馬力
騒音値45dB
25Lタンク付

6-25（標準） **¥336,000**（税別）
6-25 BMJ（BMJ付） **¥399,000**（税別）



12-25 H595×W410×D425mm
100V 800W 1.08馬力
騒音値48dB
25Lタンク付

12-25（標準） **¥498,000**（税別）
12-25 BMJ（BMJ付） **¥561,000**（税別）



BMJ


コンプレッサーエアーに含まれる水分や不純物の粒子を、 $5\mu \rightarrow 0.01\mu$ と2段階でろ過します。クリーンエアを供給するために、セットでのご購入をお勧めします。

**5 μ フィルタ・レギュレータ
+
0.01 μ フィルター（フィルタは手動ドレン式）**

※6-15、6-25の違いはタンク容量のみです。
設置環境に応じてお選び下さい。
個人～数人のラボに適しています。

※12-25は6シリーズのポンプを2基搭載しています。エアーの消費量が多い場合には、こちらをお勧めします。


オプション品

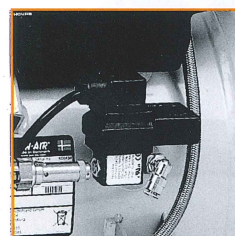

タンクオートドレン

タンク内のドレインをタイマ運転により自動で確実に排水します。

¥62,000（税別）

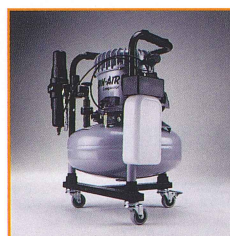

ドレンボトルキット

ドレンをポリタンクに回収できます。

¥35,000（税別）

消耗品



専用オイル

オイル交換時には必ず専用オイルをお使い下さい。

500ml入

¥8,100（税別）



インテークフィルター

吸気口用フィルター

汚れて目詰まりしてきたら交換します。

¥4,980（税別）