


信頼のマーク
DAIEI
Angel

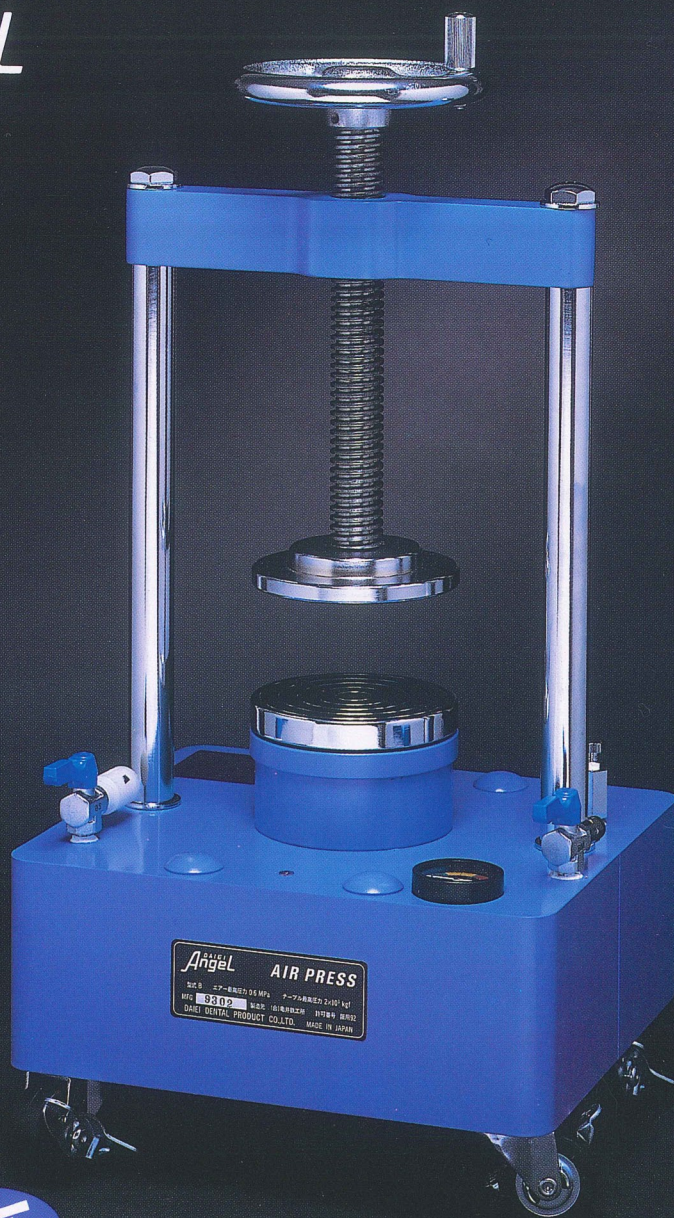

無段階加圧

一般医療機器 届出番号27B3X00209000016

—— 歯科用フラスコプレス ——

AIR PRESS

エアプレス

DAIEI DENTAL PRODUCT CO., LTD.
10-17, Kyomachibori 1-chome, Nishiku, Osaka-550, Japan.

AIR PRESS エアープレス

コンプレッサーの圧縮空気の力を利用した、エンゼルエアープレスは、最も優れた無段階加圧が、容易に得られる歯科用フラスコプレスです。操作方法は、エアーコックの開閉だけで、誰でも安心してご使用頂けます。



簡単操作

エアーコックの開閉だけの操作で、簡単にしかも確実にプレス作業が行えます。

無段階加圧

圧縮空気の圧力調整(コックの開閉)操作で、衝撃のない無段階加圧が得られます。

理想的加圧

余剰レジンが押し出されても、尚持続した加圧が得られ、良好な義歯ができます。

総合圧力

エアー圧5kg/cm²でフラスコ総合圧は、1.6t、6kg/cm²で2tと、理想的な力が得られます。

テーブル間距離

大型フラスコ2個同時加圧ができる、大きなテーブル間距離。

レジン注入

レジンの加圧注入に応用できる、大きなテーブル間距離と、45mmのピストンストローク。

大きなアッパーテーブル

φ110のアッパーテーブルは、フラスコ全体に加圧され、フラスコの傷みを防ぎます。

■仕様

寸法 W293×D252×H520mm(最高H670mm)
ピストンストローク 45mm
テーブル間距離 最大 195mm(無負荷時)
テーブル間距離 最小 38mm(無負荷時)
フレーム間距離 210mm(内寸)

テーブル直径 110mm
重量 30kg
作動空気圧 0~6kg/cm²
安全弁動作 6.5kg/cm²

■付属品

移動キャスター 4個
配管ホース 1式

■別売品

減圧コック:フィルター付
アッパーテーブル 小

大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市中千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897