

# 熱可塑性樹脂射出成型器 ボア・システム BOAR SYSTEM

一般医療機器 歯科技工用成型器 届出番号27B3X00209000001

DAIEI  
Angel



**仕様：**  
AC100V 1200W (炉部600W×2)  
H895×W870×D400mm  
重量 80kg  
インジェクション機構 エア駆動 (6気圧)  
**付属品：**  
チャンバー (シリンダー) ×4本  
フラスコ×2個  
フラスコ開輪用バー  
チャンバー用プライヤー  
アルミケース×10本  
増設エアータンク

**別売品：**

専用フラスコ  
(六角レンチ付)



把手付チャンバー



アルミケース 10本入  
(樹脂溶解用)



熱可塑性樹脂射出成型器

# BOAR SYSTEM



製造販売元 **大榮歯科産業株式会社**

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026  
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626  
福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897  
<http://www.daiei-dental.jp>

DAIEI DENTAL PRODUCT CO., LTD

10-17 Kyomachibori 1-chome, Osaka-550-0003, JAPAN




# BOAR SYSTEM は精度と操作性を両立させた 義歯用射出成型システムです

- ※完全密閉型の樹脂溶解用の電気炉を採用し、樹脂の溶解ムラを排除。
- ※フラスコ、チャンバーのセッティングが簡便で、抜群の作業効率。
- ※横スライドのエアーストンをすばやく、確実に填入。

安全カバーは填入用ピストンの始動スイッチと連動しているためカバーを閉めると同時に填入が開始されます。

フラスコ・チャンバーは横置きなので、セッティングが容易です。

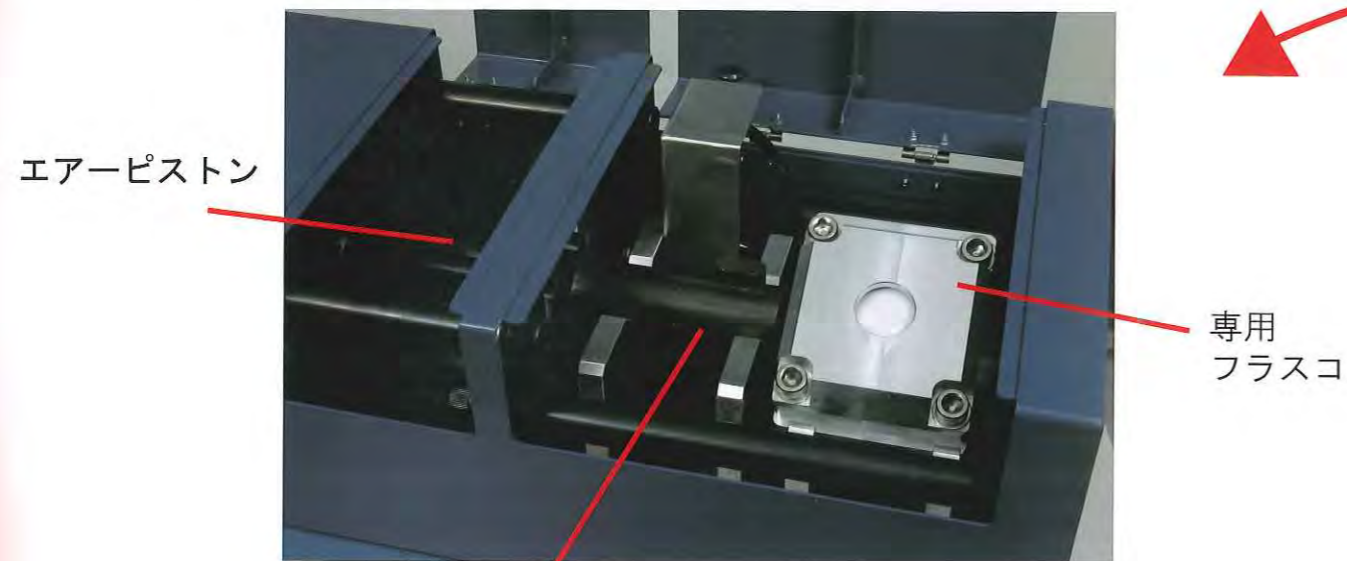

エアーストン

専用  
フラスコ



チャンバー

実用新案申請中

樹脂溶解中は高温となる加熱用のチャンバーは、把手が付いているので、電気炉からの取り出しを、安全に行うことができます。

電気炉はチャンバーを左右2本ずつ収納でき、個別に温度設定が可能です。



密閉型の電気炉によりチャンバー内部の温度ムラがなく、填入時に樹脂の温度ムラによる内部ひずみを防ぎます。