


DAIEI
Angel

エンゼル大型遠心鑄造機
CASTER C500II

縦型の

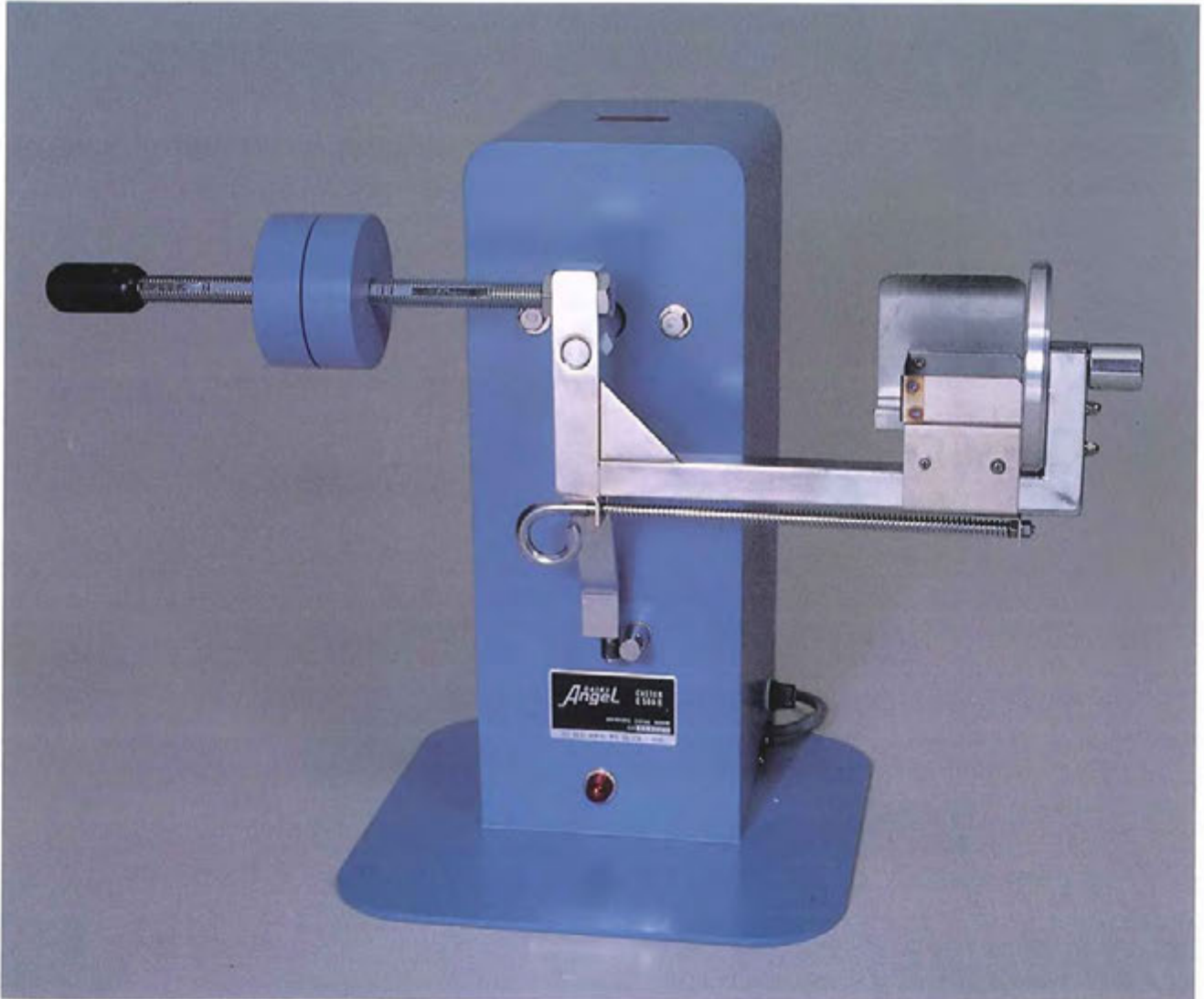

一般医療機器 届出番号27B3X0020900012

DAIEI DENTAL PRODUCT CO.,LTD.

エンゼル大型遠心鑄造機
CASTER C500II
キャスター-C500II



設置例: 大阪市 M.YAMAMOTO CERAMIST'S INC. 鑄造コーナー (防護カバーは別売品です。)

陶材焼付用合金はプレシャス合金から始まり、ノンプレシャス合金を経てセミプレシャス合金へと変遷しています。

プレシャス合金の時代では、横型遠心鑄造機で十分でした。しかし陶材焼付用合金が、プレシャス合金からノンプレシャス・セミプレシャス合金に移行したときに「なめられ」の問題が頻発するようになり、そこで「VC500」縦型遠心鑄造機に変えてこの問題を解決することができました。

同じ初速であるなら横型に比べて縦型のほうが重力の分が有利であるという持論と、大型で初速が良いということが決め手でした。つまり、比重の小さい合金は、比重の大きい合金を鑄造する場合に比べて、より良い条件でキャストする必要があるということです。

現在、このほど新しくモデルチェンジされた「C500II」を使用していますが、以前のVC500に比べて操作性、鑄造性において一段と向上しており、しかも安全面においても大変よく考慮されていると思います。

M.YAMAMOTO CERAMIST'S INC. 代表: 山本 眞

■特 長

【鑄造性】

縦型鑄造で長いアームと抜群な初速は高溶金属・ロングブリッジのワンピースキャストを可能にします。

【耐久性】

強靱な板バネ駆動装置は、故障が少なく長期使用に耐えます。

【安全性】

鑄造操作はすべて前面操作、フットスイッチによるストッパー解除は、初期回転時の不安を除きます。

■仕 様

寸 法	W560×H580×D280												
重 量	15.5kg												
電 源	AC100V 50W												
附属品	<table border="0"> <tr> <td>バランスー</td> <td>1ヶ</td> </tr> <tr> <td>ステンレスリング(#1~#6・楕円)</td> <td>各1ヶ</td> </tr> <tr> <td>ゴムフォーマー(#1~#5・楕円)</td> <td>各1ヶ</td> </tr> <tr> <td>ルツボ</td> <td>1ヶ</td> </tr> <tr> <td>本体固定ボルト・ワッシャー</td> <td>4本</td> </tr> <tr> <td>フットスイッチ</td> <td>1ヶ</td> </tr> </table>	バランスー	1ヶ	ステンレスリング(#1~#6・楕円)	各1ヶ	ゴムフォーマー(#1~#5・楕円)	各1ヶ	ルツボ	1ヶ	本体固定ボルト・ワッシャー	4本	フットスイッチ	1ヶ
バランスー	1ヶ												
ステンレスリング(#1~#6・楕円)	各1ヶ												
ゴムフォーマー(#1~#5・楕円)	各1ヶ												
ルツボ	1ヶ												
本体固定ボルト・ワッシャー	4本												
フットスイッチ	1ヶ												
※別売	<table border="0"> <tr> <td>防護カバー</td> <td>(寸法 W700×H670×D150)</td> </tr> </table>	防護カバー	(寸法 W700×H670×D150)										
防護カバー	(寸法 W700×H670×D150)												

設置方法

設置には水平で防火に適した場所を選び
本体の側面及び天面には防護カバー又は
耐火枠で囲み枠内寸法はW660×H630以
上のスペースをとって下さい。

大 榮 歯 科 産 業 株 式 会 社

本 社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

※仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。