

DAIEI
Angel

ショット式研磨機

SHOT BLAST EZ

ショットブラスト イージー



PAT. (特許取得済)

研磨工程を簡素化し
短時間で鏡面仕上に

一般医療機器 届出番号27B3X00209000024

DAIEI DENTAL PRODUCTS CO.,LTD.

10-17,Kyomachibori 1-chome,Nishiku,Osaka-550-0003,JAPAN

ショットブラストEZは弾性樹脂研磨材を使用し（特許取得済）、研磨物の表面性状を損なわずに微細な研磨を実現した研磨材射出型研磨機です。

駆動は電気モーターで、エアーブラスト方式に比べ射出効率が高く、短時間で研磨作業が完了します。

一方で、従来は煩雑であった研磨材の再生処理も簡便に行う事ができるので、メンテナンス作業にもご負担をおかけしません。

対象研磨物

金属床

→通常の研磨が困難な、チタン床は特に有効です。

クラウン・ブリッジ

→深い隆線形態の咬合面でも再現性の高い研磨が可能です。
硬質レジン等も同時に研磨出来ます。

レジン床


→粘膜面の適合を損なわず滑沢にすることが出来、デンチャーの装着がスムーズになります。



一般的名称
機器の分類
届出番号
エアー圧
入力電源
最大定格
寸法
本体重量

歯科技工用金属表面加工器
一般医療機器
27B3X00209000024
0.3～0.6Mpa
AC100V 50/60HZ
500W
W310×H760×D410mm
36Kg

※ショットブラスト本体には研磨材は付属していません。用途に応じて2種類の研磨材のうち、いずれかをご購入の上、ご使用ください。

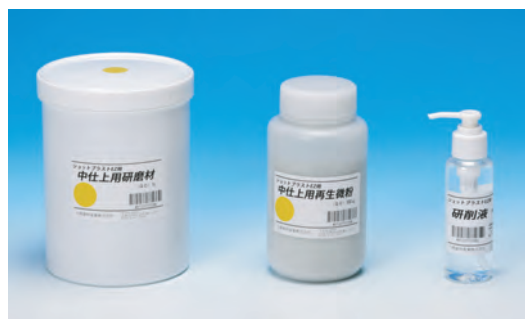

研磨材 中仕上セット（GC）

（中仕上用研磨材1L、中仕上用再生微粉500g、研削液100ccc）



研磨材 鏡面仕上セット(ダイヤ)

（鏡面仕上用研磨材1L、鏡面仕上用再生微粉50g、研削液100ccc）

大栄歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市中千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897
<http://www.daiei-dental.jp>

※仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。