



・湾曲部の切削に(中目)

#1 砲弾型

全長:52.6mm
最大径:6φ
刃部長さ:14.5mm



・平面部の切削に(中目)

#2 コーン型

全長:52.6mm
最大径:6φ
刃部長さ:14.5mm



・広い面の切削に(中目)

#3 ロング型

全長:51mm
最大径:6φ
刃部長さ:20mm



・デンチャー歯頸部など細部の切削に(中目)

#4 ポインテッドショート型

全長:38mm 最大径:2.3φ 刃部長さ:14mm



・デンチャー内面などの調整に(細目)

#5 ラウンデッドショート型

全長:38mm 最大径:2.3φ 刃部長さ:14mm



・WAXの窓開け切削専用

#6 ラウンド型

全長:44.6mm
最大径:3φ
刃部長さ:3mm



・1本で2役!
人工歯の調整、保持孔付与専用(細目)

#7 コンビネーション型

全長:59mm
最大径:6φ(上部1.2φ)
刃部長さ:下部14mm、上部4mm

White Wizard

マウスガード・レジン・ワックス

Angel

White Bur

エンゼルホワイトバー

販売名:ジルコニアホワイトバー
一般医療機器 歯科用研削器材
届出番号:27B2X00306W00002
※チャックカードのカラーは選べません



高耐久性

ジルコニアは高いモース硬度を誇っており、優れた耐摩耗性を持っています。



低熱伝導率

ジルコニアは熱伝導率が低い為、熱に弱い素材(マウスガード材やデンチャー用樹脂)をサクサク切削でき、目詰まりもしにくく、作業効率が上がります。



低帯電性

エンゼルホワイトバーで削った切削粉は静電気を帯びにくい為、軽くエアーで飛ばして落とすことができます。




高切削力

エンゼルホワイトバーはシャープな高精度クロスカットで切削力が高く、スムーズな面を形成できます。



100倍

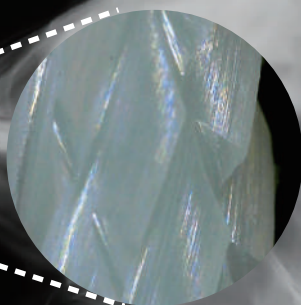

#4
ポインテッドショート型

DAIEI Angel 大榮 歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387
名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市中千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897