

チタンクラウンの研磨にも使える回転バレル式研磨機

- ・技工物を保持具で固定し、回転を加えながら研磨を行う卓上自動研磨機です。
- ・インレー、クラウン、クラスプ、バーなどの症例を短時間で効率的に研磨します。
- ・咬合面や研磨しにくい維持部に効果を発揮します。



研磨時間

研磨物	研磨時間 (中仕上げ)	研磨時間 (光沢仕上げ)
クラウン	5~10分	10~15分
インレー	5~10分	10~15分
ブリッジ	10分~15分	10~15分
クラスプ	10分	10~15分
バー	20分	10~15分

ショット式研磨機 ショットブラストEZ

適合はそのままに磨きにくい箇所も効率良く研磨

- ・金属床、レジン床、ブリッジ症例などで手作業では磨き難い症例に効果を発揮します。
- ・専用の弾性樹脂研磨材は、研磨物表面の形状を損なわず滑沢に仕上げます。
- ・研磨材は再生処理で繰り返しご使用いただけます。



横型遠心鋳造機 エンゼルキャスター

縦型遠心鋳造機 C500II

強力なカートリッジ式バネ採用で長持ち&経済的



寸法 φ385×H220mm(回転時)
重量 5kg

歯科工具用金型鋳造機器 一般医療機器 27B2X00306K00011

SPECIAL
PRICE

標準価格
298,000円(税別) ▶▶▶

SPECIAL
PRICE



- ・95度にまで傾斜する2重振子が、初速の遠心力を倍加させます。
- ・交換用スプリングはカートリッジ式で簡単に交換できます。
- ・シンプルな設計で非常に経済的です。

・鋳造力と安全性を追求した縦型遠心鋳造機です。

・強力な初速で、高溶解合金に威力を発揮します。

・フットスイッチ操作で鋳造時の作業コントロールがしやすい機種です。

寸法 W560×H580×D280mm
重量 15.5kg

歯科工具用金型鋳造機器 一般医療機器 27B2X00306K00011

デンタルスチーマー ロコモ

パワフルな高压スチームで高い洗浄効果

- ・生成される強力なスチームは洗浄力が高く、洗浄時間を大幅に節約できます。
- ・本体は非常にコンパクトで、限られたスペースでも設置が可能です。
- ・シンプルな構造とイオン交換器によるスケール除去で壊れにくい設計です。



ハンドピースホースの長さは
75cm/120cmからお選び
いただけます。
様々な設置環境にも柔軟に対応します。




イオン交換器の働きにより、
水道中の不溶物(カルキ、ミ
ネラル、スケール)を除去。
簡単な定期メンテナンスで、
長く快適にご使用いただけます。



Best
Seller



壁掛け用ハンガー(別売)
をご使用いただくことで、
壁面に本体を取り付け可
能です。省スペースとし
て作業台が更に向上了します。
※詳細は弊社担当まで
ご確認ください。

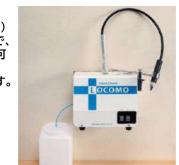

寸法 W295×H245×D166mm
電力 1450W
重量 12kg
ホース長さ 75cm / 120cm
ウォーターカップ 4リットル
別売品 ST壁掛けハンガー
歯科工具用洗浄器 一般医療機器 27B2X00306K00003

SPECIAL
PRICE
標準価格
298,000円(税別) ▶▶▶

軟化圧接成型器 デュアルフォーマーII

加圧成型で再現性の高いマウスピース製作が可能に！



- 丸型、角型シート材に対応、加圧・吸引両用の軟化圧接成型器です。
- マウスガード、ブリーチングトレー、ナイトガードなど各種トレーに対応します。
- 边缘部が封鎖された適合の良いトレー製作が可能です。



標準価格
278,000円(税別) ➤➤➤ **SPECIAL PRICE**

寸法 W285×H440×D280mm
重量 10kg
加圧 0.19～0.59MPa
吸引 700mmHg
別売品 加圧ボット 横固定用砂

歯科用工具機器 一般医療機器 2782X00306K00008

電気ファーネス MD-R1

700°C到達まで15分、10通りの焼成プログラム登録可能



- 炉内はφ90リングが2個入るワイドな設計になっています。
- 予約タイマー機能付きで、業務に合わせたスケジュール管理が可能です。
- ヒートショック対応のマイコン電気炉です。



標準価格
288,000円(税別) ➤➤➤ **SPECIAL PRICE**

寸法 W295×H390×D390mm
保留 1～5段階
最高温度 1000°C
電力 1100W
動作ステージ表示
動作進行の経緯を表示します
電源スイッチ


歯科用工具機器 一般医療機器 2782X00306K00028

真空攪拌線和機 Vmixing-D

専用プロペラ羽根で満遍なく攪拌＆真空脱泡



- オプションでスタンド式にすることもできます。
- 付属品：攪拌カップ（大500ml）、小250ml
- 付属品：攪拌カップ（特大1000ml）

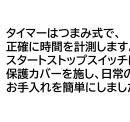

標準価格
185,000円(税別) ➤➤➤ **SPECIAL PRICE**

寸法 W214×H229×D188mm
※スタンド使用時
W220×H565×D215mm
重量 5.6kg
エアー圧 0.5～0.6MPa


歯科用工具機器 一般医療機器 2782X00306M00001

サンダブラスター シリーズ

用途や目的に合わせた豊富なバリエーション



- サイクルブラスターJr. 循環式サンダブラスター。院内ラボにもオススメなコンパクトサイズです。
- サイクルジュニアII 2種の研磨材を使用できるタイプ。内面処理に最適なノズルサイズです。
- サイクルジュニアIII 3種の研磨材を使用できるタイプ。作業効率の向上と研磨材を節約できます。

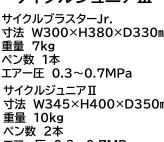

研磨材について
コチラ
左:循環式ノズル(φ 0.6mm)
右:加圧式ノズル(φ 0.8mm)

標準価格
サイクルJr. 168,000円(税別)
サイクルジュニアII 218,000円(税別)
サイクルジュニアIII 298,000円(税別)

➤➤➤ **SPECIAL PRICE**


歯科用工具機器 一般医療機器 2782X00306K00005 2782X00306K00006 2782X00306K00007

金属床用サンダブラスター サンデックスV

面倒な埋没材、石膏除去にはパワフルなこの1台！



- 専用研磨材が硬く焼き付いたリン酸塩系埋没材も効率よく剥がします。
- 集塵装置内蔵で集塵用エアーノズルの働きにより、ボックス内の粉塵を外に逃がしません。
- 金属床の埋没材除去に特にオススメです。

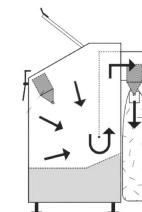

広口径φ4mmノズルから
専用研磨材(カーボランダム)を強く吹き付け、除去
作業の手間を軽減します。

標準価格
298,000円(税別) ➤➤➤ **SPECIAL PRICE**

寸法 W350×H570×D385mm
重量 15kg
エアー圧 0.39～0.69MPa
歯科用工具機器 一般医療機器 2782X00306K00014



研磨材について
コチラ

加圧埋没器 バブルリムーバーV

真空脱泡で铸造物を气泡から守る縦型加圧埋没器



- φ130の金属床用リングが2個収納できる縦型加圧埋没器です。
- バスケットが付属しており、簡単に取り出しが可能です。
- 温水を入れたラバーボール等を使用しての義歯修理、レジン重合器としてもご使用いただけます。



標準価格
150,000円(税別) ➤➤➤ **SPECIAL PRICE**

外寸法 W282×H350×D180mm
内寸法 φ145×H218mm
(φ130×H95リング2個収納)
重量 14.5kg
エアー圧 0.2～0.5MPa
歯科用工具機器 一般医療機器 2782X00306K00017

電気レーズ エンゼルレーズ-D

無段階变速で工程に合わせたスピード調節&ハイトルク！



ON/OFFボタンはフラットで、
電源充電の異物混入を防ぎます。



標準価格
135,000円(税別) ➤➤➤ **SPECIAL PRICE**

寸法 W300×H198×D170mm
重量 9.6kg
最高回転数 10,000rpm
歯科用工具機器 一般医療機器 2782X00306M00002

熱可塑性レジン射出成型機 フレックスプレス

小型ながら、この1台で「溶解→ショット→保圧」まで完結



- 4面ヒーター内蔵で最高温度340°Cまで昇温し、安定した温度管理ができます。
- 溶解、保圧時間ともに60分まで、最大8パターンの重合プログラムを登録できます。
- コンパクト設計で限られた設置環境でも快適にご使用いただけます。



標準価格
998,000円(税別) ➤➤➤ **SPECIAL PRICE**

寸法 W280×H430×D250mm
重量 13.15kg
エアー圧 0.6～0.7MPa
溶解温度 0～340°C
溶解時間 1～60分
保圧時間 1～60分
歯科用工具機器 一般医療機器 2782X00306MY00001

