

アルミナ

ガラス
ビーズ

カーボ
ランダム

SAND BLASTER

歯科専用に考えた砂職人のプライド

セレクト キャンペーン

2025年

キャンペーン期間

11月10日(火) » 12月26日(金)

セルフメンテ可能なシンプル設計

院内設置も考えたスリムサイズ



埋没材除去に最適！

歯科技工用金属表面加工器 一般医療機器 27B2X00306K00005



CAD/CAM冠など
補綴物の内面処理に！

歯科技工用金属表面加工器 一般医療機器 27B2X00306K00006



金属床の埋没材 & 酸化膜除去

歯科技工用金属表面加工器 一般医療機器 27B2X00306K00014

サイクルブラスターjr

標準価格 ¥ 168,000 (税別) が

期間限定 特別価格

循環式1ペン

ガラスビーズ
or
アルミナ

サイクルジュニアII

標準価格 ¥ 218,000 (税別) が

期間限定 特別価格

循環式1ペン
+
加圧式1ペン

ガラスビーズ
&
アルミナ

サンデックスV

標準価格 ¥ 328,000 (税別) が

期間限定 特別価格

循環噴射式
集塵装置内蔵

カーボランダム
専用




循環式と加圧式の違いは？

循環式



庫内の砂を吸い上げて循環させる仕様。埋没材の除去向きなので、経済的にも安心。

加圧式

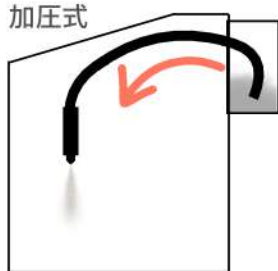

加圧タンクから常に新鮮な砂を噴射させる仕様。圧力調整可能で内面処理などの精密作業向き。



噴射ノズルのサイズは？

サイクルブラスターjr
サイクルジュニアII

サイクルジュニアII

サンデックスV



循環式ノズル
(φ2.6mm)



加圧式ノズル
(φ0.8mm)



カーボランダム専用
超硬ノズル
(広口径φ4mm)

噴射ノズルのみ交換可能！

キャンペーン期間中は 研磨砂も特別価格にてご提供！

材 質	名 称	用 途	対象機種	容 量	価 格
ガラスビーズ	 サンド荒	クリストバライト系埋没材除去 リン酸塩系埋没材除去 循環用 粒径 約 400 μ m	サイクルプラスターJr. サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	680 g	¥2,500 (税別) SPECIAL SALE
	 サンド細	クリストバライト系埋没材除去 循環用 粒径 約 140 μ m	サイクルプラスターJr. サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	820 g	¥2,500 (税別) SPECIAL SALE
	 #G-12	クリストバライト系埋没材除去 循環用 粒径 約 140 μ m	サイクルプラスターJr. サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	3 k g	¥4,400 (税別) SPECIAL SALE
	 ガラスビーズ Dパック	メタル表面のガラスビーズ研磨 デンチャーの石膏除去 プレスセラミックスの掘り出し 加圧用 粒径 約 50 μ m	サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	150 g $\times$ 15 袋	¥6,500 (税別) SPECIAL SALE
	 #G-32	メタル表面のガラスビーズ研磨 デンチャーの石膏除去 プレスセラミックスの掘り出し 加圧用 粒径 約 50 μ m	サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	4 k g	¥4,400 (税別) SPECIAL SALE
アルミナ	 #A-10	リン酸塩系埋没材除去 金属床酸化皮膜処理 循環用 粒径 約 110 μ m	サイクルプラスターJr. サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	3 k g	¥4,400 (税別) SPECIAL SALE
	 アルミナス Dパック	メタルボンド金属表面アルミナ処理 CAD/CAM冠の内面処理 加圧用 粒径 約 50 μ m	サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	150 g $\times$ 15 袋	¥6,500 (税別) SPECIAL SALE
	 #A-22	メタルボンド金属表面アルミナ処理 CAD/CAM冠の内面処理 加圧用 粒径 約 50 μ m	サイクルジュニアII サイクルジュニアIII	4 k g	¥4,400 (税別) SPECIAL SALE
カーボランダム	 #360	リン酸塩系埋没材除去 金属床酸化皮膜処理 循環用 粒径 約 200 μ m	サンデックスV	3 k g	¥5,300 (税別) SPECIAL SALE

DAIEL Angel 大榮歯科産業株式会社

〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京 TEL.03-6806-3381 名古屋 TEL.052-731-0610 福岡 TEL.092-473-7567